

beurer

BF 100_Body Complete

Программное обеспечение



RUS **Руководство по установке**



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • D-89077 Ulm (Германия)
Тел.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de • E-mail: kd@beurer.de


1 Требования к системе

- Windows XP или Vista в качестве операционной системы, кроме этого, рекомендуется использование Microsoft Excel в качестве аналитического ПО. Также можно экспортировать данные в виде файлов «*.csv» (значения через запятую).

2 Установка программного обеспечения

- **Перед** началом установки закройте все активные программы.
- Вставьте CD.
- Откройте в браузере рабочее место, а затем – CD-диск.
- Дважды нажмите на файл Setup.exe для запуска автоматической процедуры установки с помощью Setup-Wizard.
- Setup-Wizard выполняет установку поэтапно. Каждый раз подтверждайте введённые данные нажатием на **Next** (Далее). С помощью **Back** (Назад) можно возвратиться в предыдущее окно. С помощью **Cancel** (Отмена) можно в любой момент прервать процедуру установки.
- Прежде всего, выберите папку и имя, под которым должно быть установлено программное обеспечение, в данном примере это **C:\Programme\BF100**.

1. Укажите, для какой версии устанавливается программное обеспечение. Проверьте установленную версию Excel на своём PC. Если Вы используете другую программу обработки таблиц, выберите **CSV**.

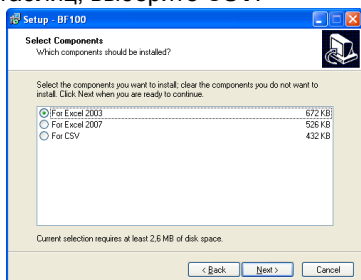

2. Задайте
 - имя программы в исходном меню, а также
 - нужно ли создать пиктограмму для рабочего стола или пиктограмму быстрого запуска. Каждый раз подтверждайте свой выбор нажатием на **Next** (Далее).
3. Все настройки отображаются в виде обзорного списка. Запустите установку нажатием на **Install** (Установить).
4. По окончании установки нажмите на **Finish** (Завершить). Программное обеспечение установлено на ПК и может быть запущено.

Запуск программного обеспечения:

- Выберите программное обеспечение в папке **Программы** по введённому имени (**BF100**).

Удаление программного обеспечения:

- Выберите **Программное обеспечение** в системе управления. На экране отображается список установленных программ. Выберите имя программы **BF100** и нажмите на **Remove** (Удалить).

3 Работа с программным обеспечением


i Пульт управления должен находиться в режиме ожидания (отображается дата и время).

- Дважды нажмите на пиктограмму на рабочем столе.
- Соедините прибор и ПК с помощью USB-кабеля. Вставьте плоский USB-штекер соединительного кабеля в USB-порт на персональном компьютере. Вставьте мини-USB-штекер в USB-порт на правой стороне пульта управления.



- На дисплее прибора отображается «CONNECTED VIA_USB» (USB-СОЕДИНЕНИЕ) на английском языке, если Вы выбрали его.
- В течение 30 секунд после подсоединения USB-кабеля нажмите на **Upload** (Загрузить) для запуска передачи данных с пульта управления на ПК. Данные

сохраняются в базу данных пользователя.

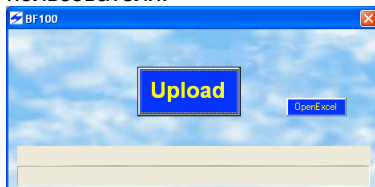

- Индикатор прогресса показывает выполнение передачи данных.
- Сообщение «UPLOAD IS COMPLETE» (КОНЕЦ ЗАГРУЗКИ) отображается, когда передача данных полностью завершена. Подтвердите сообщение нажатием на «OK».
- Чтобы просмотреть данные в программе обработки таблиц, нажмите на «Open Excel» (Открыть Excel).

i Если программное обеспечение было установлено с опцией «CSV», выполните импорт данных, сохранённых в каталоге **BF100**.

4 Указания

- Данные пульта управления остаются записанными в пульте и не удаляются при передаче.
- Вы можете в любой момент перенести данные каждого последующего сохранённого измерения на свой ПК. База данных автоматически дополняется последними добавленными записями (измерениями).
- Если Вы хотите начать работу с пустой базой данных, удалите файл UserDatabase.xls в своей папке или переименуйте его. Предварительно для сохранения данных сделайте копию файла на другом носителе.
- Не изменяйте установленные файлы. В особенности, не следует изменять файл DefaultDatabase.xls. Это может вызвать проблемы с данными.
- Не открывайте XLS-файл во время активного USB-соединения или передачи данных.
- Проверьте качество USB-соединения между прибором и ПК, если появилось сообщение об ошибке «NO USB CONNECTION» (НЕТ USB-СОЕДИНЕНИЯ). Разъедините USB-соединение примерно на 10 секунд и снова соедините пульт управления с ПК.

